

Kit de apósito Solventum™ V.A.C.® Peel and Place

Hasta 7 días de uso y 2 minutos de aplicación^{1, 2}

La aplicación más fácil y rápida de la terapia 3M™ V.A.C.® ya está aquí. El apósito V.A.C.® Peel and Place es el primer apósito de la terapia V.A.C.® con hasta 7 días de tiempo de uso. Un diseño integrado todo en uno agiliza la aplicación, reduce el tiempo y la formación necesarios para los cambios de apósito y maximiza la consistencia de los cuidados a lo largo de todo el proceso del paciente.

El diseño todo en uno facilita la aplicación

1. Apósito 3M™ V.A.C.® Granufoam

Se adapta al lecho de la herida sin necesidad de rellenos de espuma, para proporcionar una presión negativa uniforme y una eliminación eficaz de los fluidos.

2. Capa no adherente perforada

Permite que el apósito se extienda sobre la piel perilesional intacta sin necesidad de lámina adhesiva previa. Está diseñado para ayudar a mitigar el crecimiento interno del tejido.

3. Lámina adhesiva

3M™ V.A.C.® Dermatac™

La tecnología adhesiva acrílico-silicona, respetuosa con la piel, es reposicionable tras la aplicación inicial, proporciona un sellado hermético en las zonas anatómicas y puede ayudar a minimizar las molestias al retirarla.


4. Orificio de la almohadilla

Solventum™ SensaT.R.A.C.™

Precortado para una aplicación fácil y uniforme de la almohadilla SensaT.R.A.C.™

5. Almohadilla Solventum™ SensaT.R.A.C.™

Ayuda a controlar y mantener la presión en la zona de la herida.

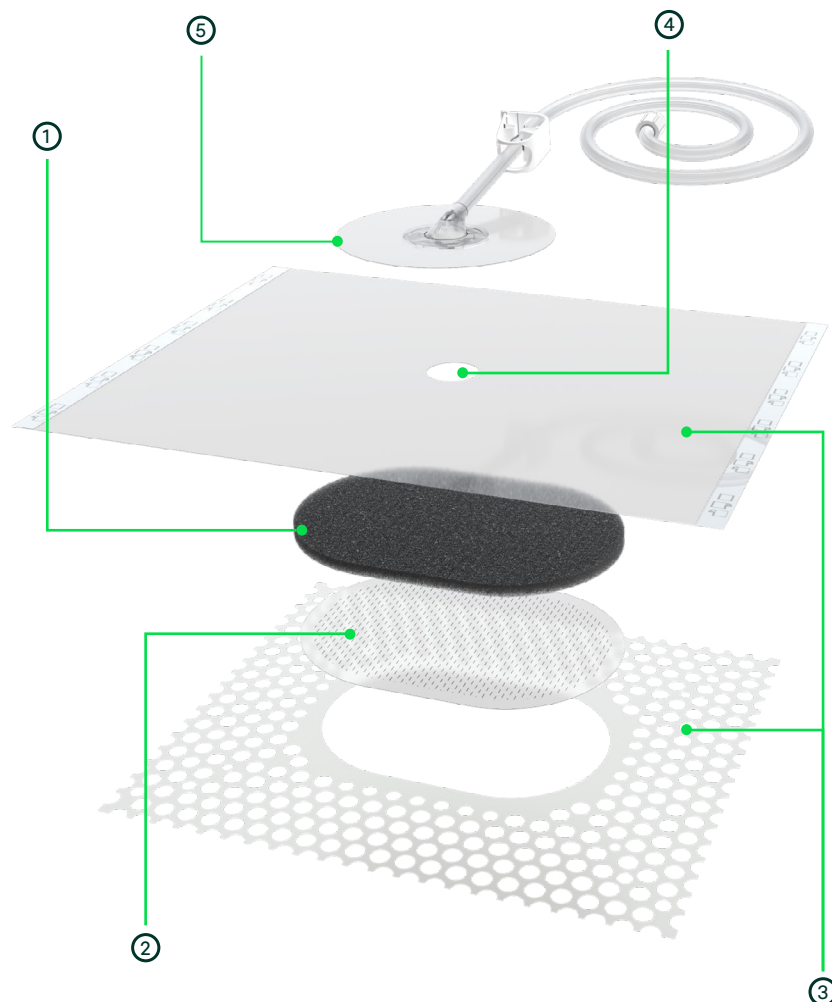

Tiempo de uso de hasta 7 días

La capa perforada no adherente permite prolongar el tiempo de uso y menos cambios de apósito, lo que da a los profesionales sanitarios la confianza necesaria para administrar una terapia de presión negativa sostenida en un entorno protegido de cicatrización de heridas. En comparación con los apósitos de espuma TPN tradicionales de Solventum, el apósito V.A.C.® Peel and Place ha demostrado una mayor reducción del volumen de la herida y un grosor del tejido granulado hasta 2,4 veces mayor en un modelo porcino de heridas abiertas.³

Promedio de 2 minutos aplicación⁺

El apósito patentado "todo en uno" permite una aplicación fácil y rápida con menos formación. Diseñado para cubrir toda la herida y el tejido circundante, el apósito V.A.C.® Peel and Place elimina la necesidad de cortar la espuma. Como parte de una prueba de uso simulada, el personal de enfermería lo ha calificado como más fácil de usar que el apósito de espuma Solventum TPN tradicional.⁴ En una prueba de preferencia del paciente, 10 de 10 pacientes no manifestaron dolor al retirarlo.⁵

Cuidado uniforme en todos los entornos

El diseño sencillo y versátil del apósito V.A.C.® Peel and Place es compatible con múltiples unidades de terapia V.A.C.®, lo que significa que el tratamiento puede pasar de un entorno asistencial a otro, ofreciendo al personal clínico la seguridad de que la terapia de presión negativa para heridas puede mantenerse eficazmente en diversos entornos asistenciales.

1. SAT-BSER-05-869347 VAC Peel and Place (Ganymede) BSER. 510(k) K222859.

2. En una prueba de uso simulado con 12 enfermeros y cirujanos. Tiempo medio de 01:48. Estudio de marketing SAT-MTF-05-995965 para el apósito Solventum™ V.A.C.® Peel and Place. 2023.

3. La información contenida en los estudios realizados en animales no ha sido evaluada en humanos. SAT-MTF-05-982101 Evaluation of V.A.C.® Peel and Place Dressing Concepts in Full-Thickness Excisional Wounds. 2023. Allen D, Robinson T, Schmidt M, Kieswetter K. Preclinical assessment of novel longer-duration wear negative pressure wound therapy dressing in a porcine model. *Wound Rep Reg*. 2013; 31:349-359.

4. En una prueba de uso simulado con 12 usuarios enfermeros y cirujanos, en la que la valoración media fue de 5,8 sobre 7 en una escala Likert de 7 puntos, en comparación con el apósito de espuma TPN tradicional de Solventum™ y una lámina adhesiva de acrílico y silicona independiente, en los que la valoración media fue de 4,6 sobre 7 en una escala Likert de 7 puntos (p=0,01, prueba de rangos con signo de Wilcoxon). Estudio de marketing SAT-MTF-05-995965 para el apósito V.A.C.® Peel and Place. 2023.

5. Encuesta presencial (2020); prueba de preferencia de 10 usuarios que aportan comentarios sobre su experiencia en un hospital de Chile. Los apósitos se usaron entre 4 y 7 días antes de su retirada. SAT-DOC-0000052106. 8005 Ganymede Customer Preference Test Post Market Consumer Survey Report. 2021.

Instrucciones de uso

Consideraciones

El apósito V.A.C.® Peel and Place puede utilizarse en heridas crónicas, agudas, traumáticas, subagudas y dehiscentes, quemaduras de espesor parcial, úlceras (como las diabéticas, por presión o insuficiencia venosa), colgajos e injertos.

El apósito V.A.C.® Peel and Place no es adecuado para heridas que presenten socavamiento superior a 2 cm, tunelización o una profundidad superior a 6 cm. Utilice un apósito de terapia V.A.C.® diferente si no se cumplen estos criterios.

Lea y siga siempre las Instrucciones de uso detalladas junto con la información de seguridad importante proporcionada en el envase.

Evaluar

Evalúe las dimensiones y la profundidad de la herida para determinar el tamaño adecuado del apósito V.A.C.® Peel and Place (consulte la tabla siguiente).

La espuma del apósito debe extenderse más allá de todos los bordes de la herida, de modo que se extienda sobre la piel alrededor de la herida. Seleccione el siguiente tamaño de apósito si no está seguro de si la espuma del apósito tiene la longitud adecuada.


Para descargar, seleccione el tamaño grande con el orificio de almohadilla SensaT.R.A.C.™ descentrado.

Colocar



Coloque el apósito con el orificio de almohadilla SensaT.R.A.C. precortado hacia arriba. Deje al menos 5 cm de borde de lámina adhesiva para sellar.

Comprobar

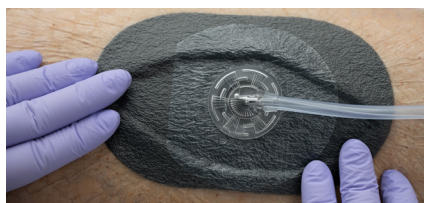

Compruebe la colocación inicial y vuelva a colocarlo si es necesario. Una vez listo, alise las arrugas, presione el borde de la lámina adhesiva y retire las barras de manipulación para establecer un sellado.

No utilizar en heridas con:



El apósito debe adaptarse al lecho de la herida

Si herida se extiende más allá del apósito, seleccione un tamaño más grande

El apósito debe extenderse más allá del borde de la herida



Conectar



Retire ambas capas protectoras y aplique la almohadilla SensaT.R.A.C. sobre el centro del orificio precortado. Conecte el tubo a la unidad de terapia V.A.C.® e inicie la terapia.

Retirada

El diseño integrado del apósito V.A.C.® Peel and Place permite usar el apósito hasta siete días. Cuando llegue el momento de retirar o cambiar el apósito, retírelo suavemente de la herida, utilizando agua estéril o solución salina normal si el apósito se adhiere a la herida.

Información sobre pedidos e instrucciones						
	Nombre del producto y SKU	Profundidad máxima de la herida	Tamaño máximo de la herida	Tamaño total del apósito	Ubicación del orificio precortado	Apósitos/caja Apósitos/estuche
Kit de apósito Solventum™ V.A.C.® Peel and Place	Pequeño EZ5SML	2 cm o menos	6,1 cm x 8,6 cm	16,9 cm x 20,6 cm	Centro	La unidad de medida es el estuche de 5 (C05) 5 apósitos por caja
	Mediano EZ5MED	4 cm o menos	11,1 cm x 16,6 cm	23,7 cm x 29,2 cm	Centro	
	Grande EZ5LRG	6 cm o menos	13,6 cm x 24,2 cm	26 cm x 35,6 cm	Descentrado	

Compatible con unidad de terapia 3M™ V.A.C.® Ulta, unidad de terapia 3M™ ActiV.A.C.™.

Nota: Para estos productos y tratamientos existen indicaciones específicas, contraindicaciones, advertencias, precauciones e información de seguridad. Consulte con un médico y las instrucciones de uso del producto antes de su aplicación. Este material está dirigido a profesionales sanitarios.



← Vea el vídeo de instrucciones de aplicación



KCI Clinic Spain S.L.U
Juan Ignacio
Luca de Tena 19-25
28027 Madrid

© Solventum 2025. Solventum, el logotipo de la "S" y otras marcas comerciales son marcas comerciales de Solventum o sus filiales. OMG1538128.

Obtenga más información sobre el apósito V.A.C.® Peel and Place en go.solventum.com/VACpeelandplace