



Selectieoverzicht voor Oncologie I.V. fixatieverbanden

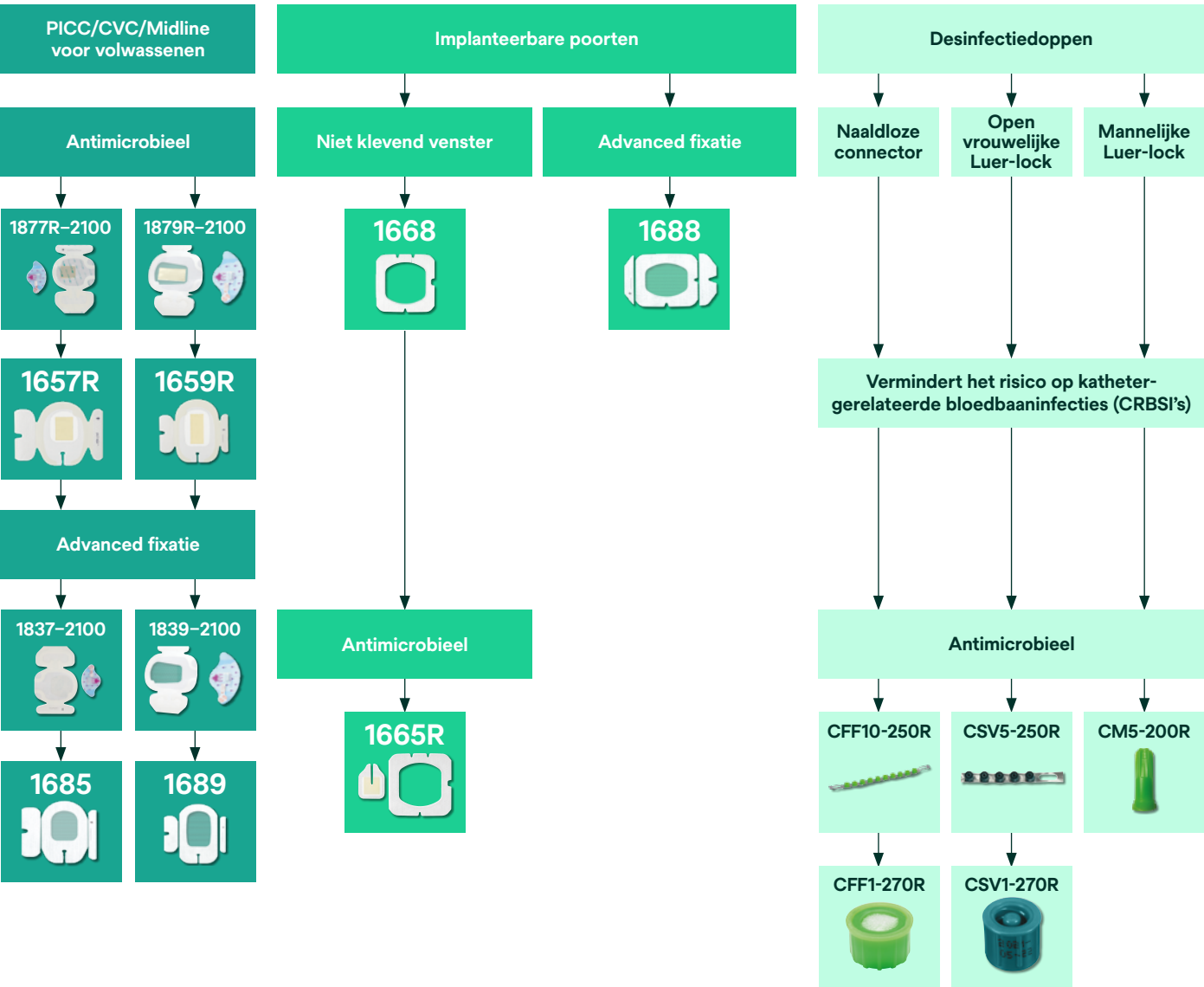

Verbeter het resultaat voor uw patiënten met de juiste verbandkeuze.

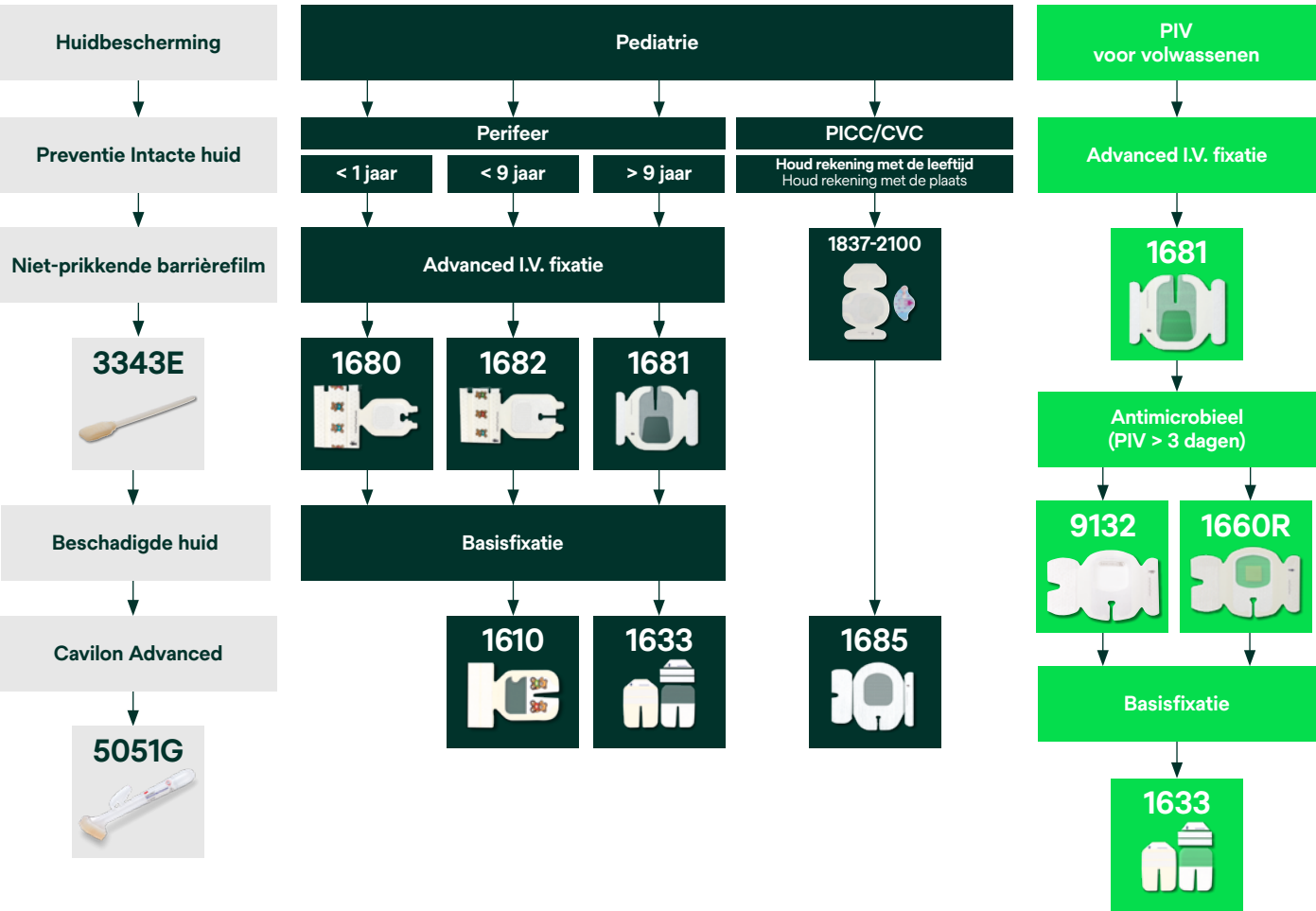

Zorg ervoor dat er een volledige en holistische beoordeling wordt gemaakt voor de keuze van de juiste vasculaire katheter. Tegaderm™ I.V. fixatieverbanden kunnen tot wel 7 dagen in situ blijven op centraal veneuze katheters en perifeer ingebrachte katheters. Curo™ desinfecterende doppen zorgen tot 7 dagen voor antimicrobiële bescherming zolang de dop niet wordt verwijderd.

Zorg ervoor dat alle lokale richtlijnen en procedures worden gevolgd. Gebruik klinisch inzicht om de verbandkeuze aan te passen op basis van veranderende behoeften op het gebied van vasculaire toegang.

Het selectieoverzicht voor de juiste keuze fixatieverbanden is slechts een richtlijn.

Overwegingen

Patiënt

Geestelijke toestand, huidconditie, bijv. diaforetische of kwetsbare huid, bekende allergieën zoals chloorhexidine.

Kathetertype

Aantal lumen, voor perifere katheters al dan niet met bijspuitpunt, voor Huber vleugelsnaalden, getunneld versus niet-getunneld, katheters met een grotere diameter, enzovoort.

Plaats van inbrenging

Extra veiligheid vereist op kwetsbare plaatsen zoals pols, voet, hoofd en lies. Houd rekening met de verblijftijd van de canule.

MARSI

MARSI (Medical Adhesive Related Skin Injury) Oncologiepatiënten hebben een hoger risico op huidletsel ten gevolge van medische kleeflagen. Ter preventie kunt u Cavilon NSBF gebruiken of bij aanwezig huidletsel de Cavilon Advanced inzetten.

Hoogrisico patiënten

Immuungecompromitteerden, chemotherapie, ernstig zieken, klinische infectieverschijnselen van de insteekplaats.

Bestelinformatie

Bestelnummer	Productomschrijving	Inhoud/Afmeting	Stuks per doos
Huidbescherming onder kleeblagen			
3343E	3M™ Cavilon™ NSBF Foamapplicator	1 ml	25
3343P	3M™ Cavilon™ NSBF Foamapplicator	1 ml	5
5051G	3M™ Cavilon™ Advanced	0.7 ml	20
5051G4P	3M™ Cavilon™ Advanced	0.7 ml	4
Antimicrobieel fixatieverbanden			
1657R	3M™ Tegaderm™ CHG I.V. fixatieverband	8.5 cm x 11.5 cm	25
1658R	3M™ Tegaderm™ CHG I.V. fixatieverband	10 cm x 12 cm	25
1659R	3M™ Tegaderm™ CHG I.V. fixatieverband	10 cm x 15.5 cm	25
1660R	3M™ Tegaderm™ CHG I.V. fixatieverband	7 cm x 8.5 cm	25
9132	3M™ Tegaderm™ Antimicrobieel Advanced PIV-fixatieverband	7 cm x 8.5 cm	25
Advanced fixatieverbanden			
1680	3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced pediatriesch fixatieverband	3.8 x 4.5 cm	100
1682	3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced pediatriesch fixatieverband	5 x 5.7 cm	100
1681	3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced fixatieverband	7 x 8 cm	100
1685	3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced fixatieverband	8.5 x 11.5 cm	50
1689	3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced fixatieverband	10 x 15.5 cm	25
Standaard fixatieverbanden			
1610	3M™ Tegaderm™ Pediatriesch I.V. fixatieverband	5 x 5.7 cm	100
1633	3M™ Tegaderm™ Transparant I.V. fixatieverband	7 x 8.5 cm	100
Fixatieverbanden met fixatiehulpmiddel voor PICC's en CVK's			
1837-2100	3M™ Tegaderm™ PICC/CVC fixatiehulpmiddel + I.V. Advanced	8.5 cm x 11.5 cm	20
1839-2100	3M™ Tegaderm™ PICC/CVC fixatiehulpmiddel + I.V. Advanced	10 cm x 15.5 cm	20
1877R-2100	3M™ Tegaderm™ PICC/CVC fixatiehulpmiddel + I.V. Advanced + CHG-gelpad	8.5 cm x 11.5 cm	20
1879R-2100	3M™ Tegaderm™ PICC/CVC fixatiehulpmiddel + I.V. Advanced + CHG-gelpad	10 cm x 15.5 cm	20
Fixatieverband voor geïmplanteerde poorten			
1658R	3M™ Tegaderm™ CHG I.V. Advanced fixatieverband	10 x 12 cm	25
1668	3M™ Tegaderm™ I.V. Poortverband met niet-klevend venster	12 x 12 cm	25
1665R	3M™ Tegaderm™ I.V. Poortverband + CHG-gelpad en niet-klevend venster	12 x 12 cm	25
1688	3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced fixatieverband	10 x 12 cm	50
Desinfecterende poortbeschermers			
CFF1-270R	3M™ Curosum Desinfectiedop voor naaldloze connectors	los in een box	270*
CFF10-250R	3M™ Curosum Desinfectiedop voor naaldloze connectors	10 op een Strip	250*
CSV1-270R	3M™ Curosum Stopper Desinfectiedop voor open vrouwelijke Luer-lock	los in een box	270*
CSV5-250R	3M™ Curosum Stopper Desinfectiedop voor open vrouwelijke Luer-lock	5 op een Strip	250*
CM5-200R	3M™ Curosum Tips™ Desinfectiedop voor mannelijke Luer-lock	5 op een Strip	200*

*Aantal doppen