solventum



La confianza que sus pacientes necesitan

3M™ Kerramax Care™ El apósito superabsorbente en el que puede confiar

3M™ Kerramax Care™ El apósito superabsorbente mejora la atención y la experiencia para los pacientes



Las heridas crónicas con mucha exudación son difíciles tanto para el sanitario como para el paciente. El exceso de exudado puede dificultar que se alcance el equilibrio óptimo de humedad y puede dar lugar a maceración.

Las heridas con mucha exudación también tienen un impacto negativo en la calidad de vida del paciente. Los pacientes con heridas crónicas con mucha exudación, como úlceras venosas de las piernas, frecuentemente experimentan emociones negativas como rechazo, vergüenza y soledad.[1]

Kerramax Care Apósito: ayuda con confianza a los médicos a superar los 3 principales retos de las heridas con mucha exudación

El desafío 1

Mejore los cuidados gestionando la exudación de forma eficaz

El desafío 2

Reduzca los cambios de apósito no planificados

El desafío 3

Mejore la experiencia para los pacientes




3M™ Kerramax Care™ Apósito superabsorbente

Los apósitos superabsorbentes 3M™ Kerramax Care™ con Tecnología Exu-Safe™ pueden ayudar a médicos y pacientes a superar los retos que plantean las heridas con mucha exudación[2-4].

1. Material no tejido suave
Se presenta en ambas caras del apósito, por lo que es posible colocar cualquiera de las dos caras sobre la herida sin dejar de ser cómodo para el paciente, contribuyendo al cumplimiento por parte del paciente.[2,3]

2. Capa absorbente horizontal
Absorbe el exudado seroso y viscoso[2,3] y lo distribuye uniformemente por todo el apósito, tanto horizontal como verticalmente, de modo que aprovecha toda la capacidad de absorción a la vez que ayuda a evitar el abultamiento.[2-4]

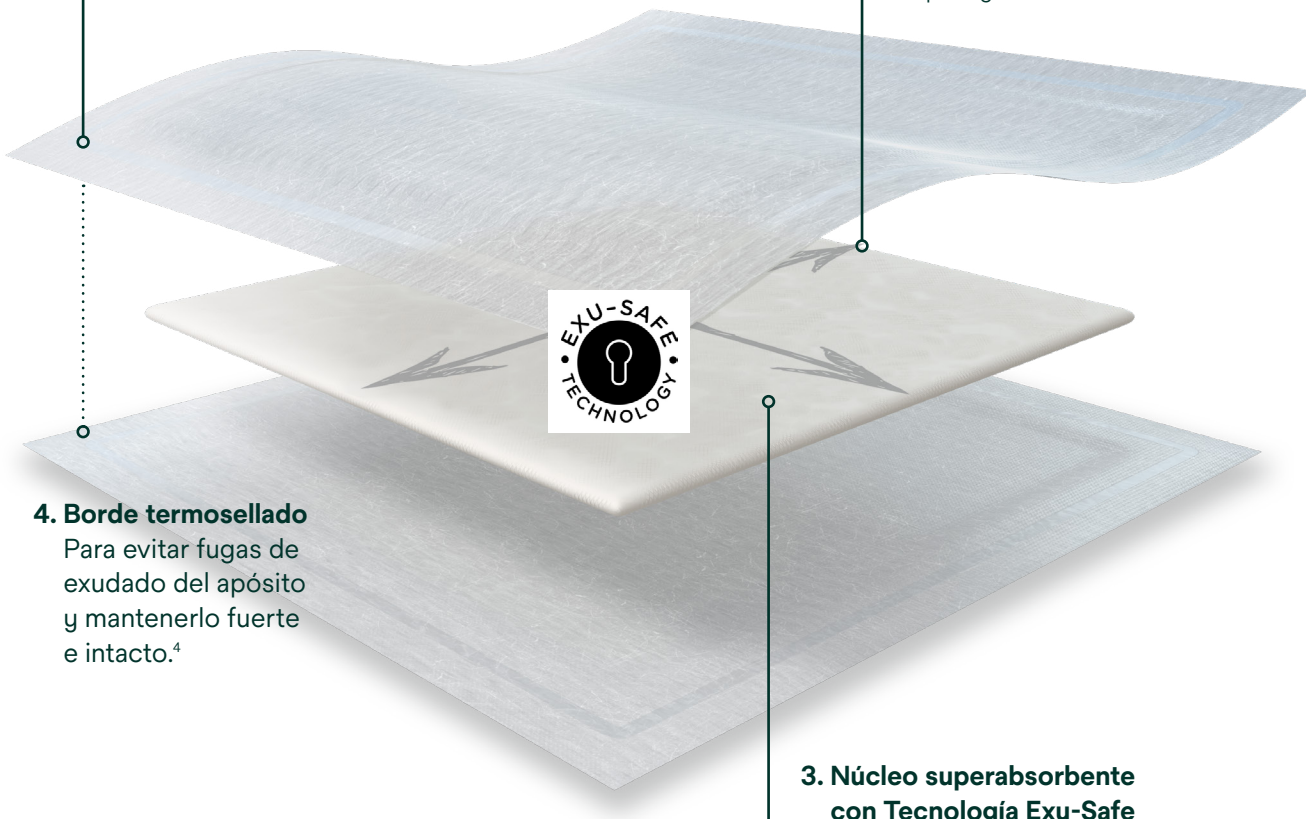

4. Borde termosellado
Para evitar fugas de exudado del apósito y mantenerlo fuerte e intacto.[4]


3. Núcleo superabsorbente con Tecnología Exu-Safe
Absorbe y retiene niveles elevados de exudado, reduciendo el riesgo de maceración.[2-4*]

El desafío 1

Mejore los cuidados gestionando la exudación de forma eficaz

El apósito superabsorbente 3M™ Kerramax Care™ absorbe y retiene niveles elevados de exudado seroso y viscoso alejados de la piel perilesional y del lecho de la herida, lo que ayuda a reducir la maceración de la piel, incluso sometidos a compresión.[2,4]

¿Cómo funciona?

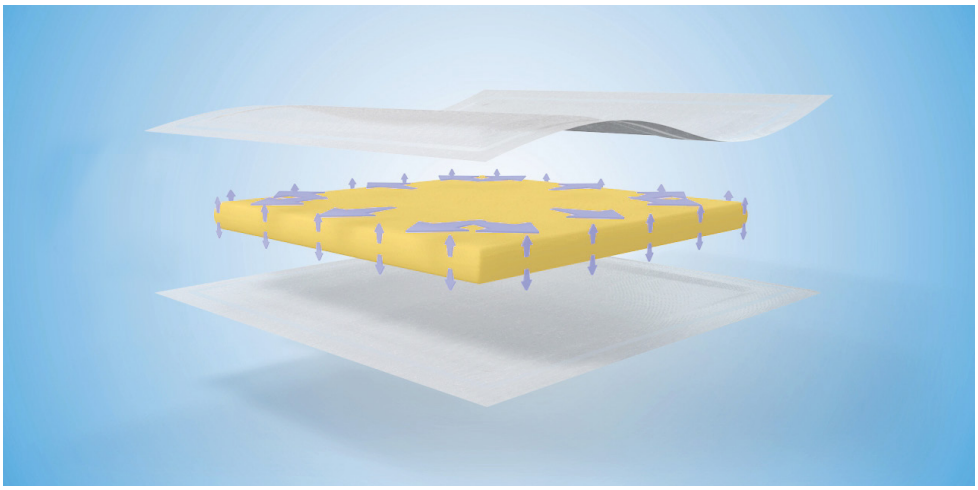

La capa absorbente horizontal garantiza que el exudado se absorba uniformemente por todo el apósito, lo que reduce el riesgo de bloqueo del gel[3,4] que puede provocar fugas.

La absorción elevada de líquidos puede permitir menos cambios de apósito y minimizar las perturbaciones en el lecho de la herida.[2,3]

Gestión eficaz y demostrada del exudado.

En un estudio de evaluación clínica en 101 pacientes con heridas muy exudativas de diversas etiologías se determinó que, para:[2]



Con fines meramente ilustrativos; no pretende representar la población de pacientes estudiada.

71%


de los pacientes, los enfermeros puntuaron **la gestión del exudado** con el apósito Kerramax Care con entre 8 y 10 puntos sobre una escala de 10 en comparación con el apósito de su elección anterior.

78%

de los pacientes, el estado de la **piel circundante mejoró** durante el tratamiento y se **observó menos maceración.**

¿Sabía que...?

Puesto que el Kerramax Care Dressing retiene el exudado incluso bajo compresión, ayuda a proteger el delicado tejido de la herida, los bordes de la herida y la piel circundante.[2-4] Gracias a la Tecnología Exu-Safe™ en el núcleo del apósito, el apósito también ayuda eficazmente a retener las bacterias y las metaloproteinasas de matriz (MMP) presentes en el fluido de la herida y a contener estas amenazas potenciales en el núcleo del apósito.[5*]

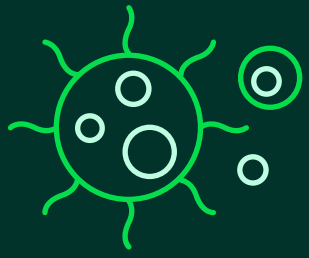


*Demostrado *in vitro*, no se ha investigado su relevancia clínica.

El desafío 2

Reduzca los cambios de apósito no planificados


Aunque la elección óptima del apósito es importante para lograr una buena evolución de la curación, también es importante minimizar la frecuencia de los cambios de apósito para permitir que esta curación tenga lugar sin perturbaciones.[2]

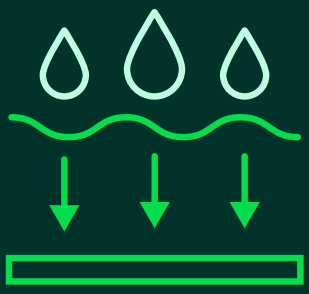

La absorción y retención elevadas de el apósito superabsorbente 3M™ Kerramax Care™ pueden reducir los cambios de apósito y minimizar los desiquilibrios en el lecho de las heridas.[2,3]

Experiencia de los profesionales sanitarios con los apósitos Kerramax Care.

Basándose en una evaluación de 101 pacientes con heridas muy exudativas de diversas etiologías, se evaluó la conveniencia del apósito Kerramax Care.[2]

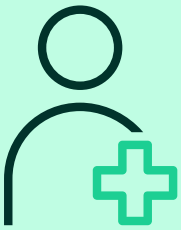

63% **Expectativas cumplidas**[2]

31% **Expectativas superadas**[2]



90%
Contentos de seguir utilizando el apósito Kerramax Care como primera opción[2]

¿Cuánto líquido pueden absorber los apósitos Kerramax Care?*



*Data on file: Lodhi, N & Warde, D. *Free-swell absorbency testing,* CHC R839, 2019

El desafío 3

Mejore la experiencia para los pacientes

Una experiencia positiva de los pacientes puede reducir el estrés y la ansiedad durante el tratamiento de heridas crónicas, lo que a su vez puede reducir el dolor y mejorar el cumplimiento del tratamiento.[1] El apósito superabsorbente 3M™ Kerramax Care™ están diseñados pensando en la comodidad de los pacientes.[2,3]

Mejorar la experiencia del paciente

En un estudio reciente con pacientes acerca del tratamiento de heridas con mucha exudación en la comunidad, se evaluó la experiencia de los pacientes en función a su comodidad. Se realizaron 101 evaluaciones en total con pacientes que presentaban heridas de distintas etiologías.[2]

El **70%** de los pacientes

puntuaron el apósito con entre 8 y 10 puntos, lo que destaca **un nivel elevado de comodidad** y una **experiencia positiva para los pacientes.**[2]



Kerramax Care El apósito superabsorbente es el complemento ideal de la terapia de compresión.


El perfil bajo del apósito Kerramax Care y su capacidad para absorber y retener el exudado incluso sometido a compresión[4,6] hace que sea una gran elección para ayudar a médicos y pacientes en el tratamiento de las úlceras venosas de las piernas (UVP).

Wounds International publicó recientemente 8 estudios de casos que evalúan el rendimiento clínico del apósito Kerramax Care y del sistema de compresión de dos capas 3M™ Coban™ 2. Los resultados muestran que los pacientes con UVP tratados en diferentes ámbitos de salud estaban satisfechos con el tratamiento combinado. Se mostró que el apósito Kerramax Care permanecía en su lugar durante el tiempo de uso sometido a compresión, retuvo el exudado y no se observaron filtraciones, ni fugas.[4]


3M™ Kerramax Care™ Técnica de plegado de los apósitos superabsorbentes

Los apósitos Kerramax Care son muy adaptables y se pueden plegar para adaptarlos a distintas heridas.

Entre los dedos de manos y pies

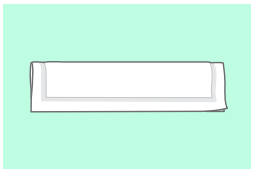


1 Doblar el apósito de 10 cm x 22 cm^2 por la mitad a lo largo.

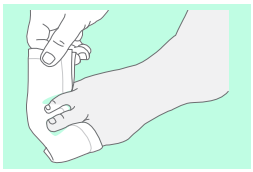


2 Entreteja el apósito entre los dedos de las manos o de los pies.


Talón y codo

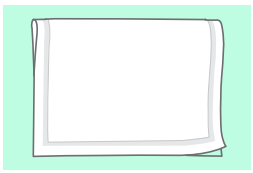


1 Doblar el apósito de 10 cm x 22 cm^2 por la mitad.

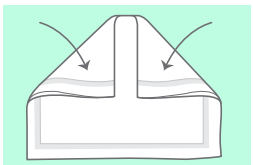


2 Doble cada esquina hacia adentro.

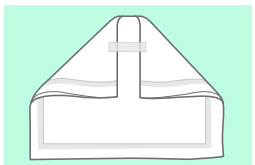

3 Aplique cinta para sujetar las esquinas dobladas en su lugar.

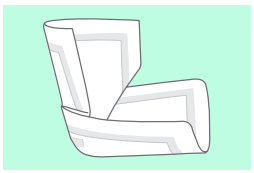


4 Abra el apósito doblado hacia afuera.

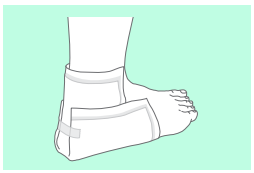


5 Coloque en el talón o el codo.


Pierna y brazo

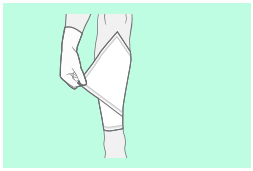

1 Coloque 20 cm x 50 cm^2 sobre la base de la pierna o el brazo.

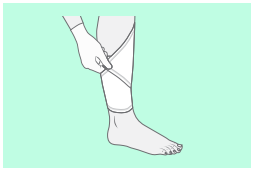

2 Envuelva la pierna o el brazo con el apósito.

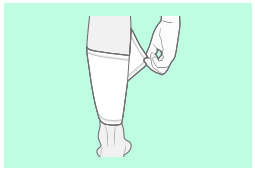


3 Superponga el apósito para asegurarse de que no queden espacios abiertos.



4 Sujete el apósito con vendaje de retención o compresión.

¿Sabía que...?

¿El apósito Kerramax Care también está disponible con borde adhesivo? Si necesita un apósito superabsorbente autoadhesivo, debe piense en la opción de utilizar el apósito de borde (con borde adhesivo acrílico).

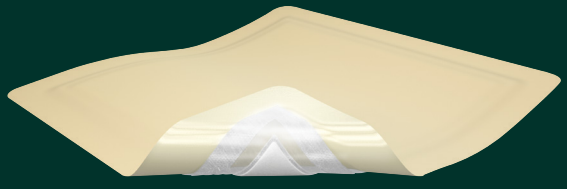

3M™ Kerramax Care™ Los apósitos superabsorbentes de un vistazo



Absorbe y retiene niveles de exudado abundantes[2,3*]



Suave, muy adaptable y plegable[6]



Retiene bacterias y MMP alejados del lecho de la herida[5]



Se puede aplicar cualquier cara del apósito sobre la herida



Se puede utilizar bajo todo tipo de compresiones[4]



Se puede dejar colocado durante siete días

*Según los resultados de ensayos *in vitro*.

Información para pedidos

3M™ Kerramax Care™ Apósito superabsorbente

Catálogo ID	Tamaño	Apósitos por caja
PRD500-025	5cm x 5cm	10
PRD500-050	10cm x 10cm	10
PRD500-100	13.5cm x 15.5cm	10
PRD500-120	10cm x 22cm	50
PRD500-240	20cm x 22cm	10
PRD500-380-B10	20cm x 30cm	10
PRD500-600-B10	20cm x 50cm	10

3M™ Kerramax Care™ Apósito superabsorbente con borde (borde adhesivo acrílico)

Catálogo ID	Tamaño	Apósitos por caja
CWL1000	16cm x 16cm	5
CWL1001	16cm x 26cm	5
CWL1002	26cm x 26cm	5

Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de cuenta de Solventum.

NOTA: Para estos productos y tratamientos existen indicaciones específicas, contraindicaciones, advertencias, precauciones e información de seguridad. Consulte a un facultativo y las instrucciones de uso del producto antes de su aplicación.

Referencias:

1. Platsidaki E, Kouris A, Christodoulou C. Psychosocial Aspects in Patients With Chronic Leg Ulcers. October 2017. ISSN 1044-7946.Index *Wounds* 2017;29(10):306–310.
2. Hughes M A, Jones J. A large-scale evaluation of managing moderate and highly exuding wounds in the community. *Wounds UK*. 2017; 13 (3): 78 – 85.
3. Jones J, Barraud J. An evaluation of Kerramax Care in the management of moderate to heavily exuding wounds. Br J Community Nurs. 2014 Mar; Suppl: S8, S50–53.
4. Hughes, M A, et al. 3M™ Kerramax Care™ Super Absorbent Dressing and 3M™ Coban™ 2 Two-Layer Compression System case series supplement. Wounds International (2022), London, UK.
5. Singh G, Byrne C, Thomason H, McBain A. Investigating the microbial and metalloprotease sequestration properties of superabsorbent wound dressings. *Sci Rep*. 2022; 12 (1): 4747.
6. Jackson S, Lovett J, Stephenson C. An assessment of the conformability of superabsorbent dressings. Póster presentado en: Wounds UK Annual Conference 2016, UK.

KCI Clinic Spain S.L.U.
Juan Ignacio Luca de Tena 19-25
28027
Madrid

©Solventum 2024. Solventum y el logotipo S son marcas comerciales de Solventum o sus filiales. 3M es una marca comercial de 3M. Otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

GL_70-2013-1463-3