solventum

3M Health Care
es ahora Solventum



Resultados clínicos en el tratamiento de las úlceras venosas de la pierna (UVP) con exudado abundante en distintos entornos asistenciales

Análisis de dos series de casos en las que se utilizaron los apósitos superabsorbentes 3M™ Kerramax Care™ y el sistema de compresión de dos capas 3M™ Coban™ 2 para el tratamiento de úlceras venosas de la pierna con exudación abundante, tanto en el ámbito ambulatorio como en el hospitalario.

Dhoonmoon, Luximi. Presentado en el Simposio sobre Cuidados Avanzados de Heridas (Spring/Wound Healing Society), del 30 de abril al 4 de mayo de 2025, en Grapevine, Texas (EE. UU.).

Datos procedentes de un entorno de atención hospitalaria.

Resumen del estudio

Clave

SOC-SAD: Apósito superabsorbente de referencia

KC-SAD 3M™ Kerramax Care™ Apósitos superabsorbentes

C2LC 3M™ Coban™ 2: sistema de compresión de dos capas

Método: Se incluyeron pacientes con úlceras venosas de la pierna altamente exudativas, previamente tratados con terapia compresiva y apósitos superabsorbentes, en tres centros especializados en heridas.

Todos los pacientes fueron tratados con el sistema de compresión de dos capas 3M™ Coban™ 2 y los apósitos superabsorbentes 3M™ Kerramax Care™, y fueron evaluados durante un mínimo de tres semanas.

Objetivos: Evaluar los resultados clínicos, los resultados comunicados por los pacientes y las preferencias de los profesionales sanitarios respecto a este enfoque terapéutico en úlceras venosas de la pierna con exudado abundante.

Entorno: Consultas de tratamiento de heridas para pacientes hospitalizados en el Reino Unido.

Pacientes: 12 pacientes de edad avanzada con úlceras venosas de la pierna (UVP) que no cicatrizaban y presentaban un alto nivel de exudado (antigüedad media de la herida: 10 meses; media inicial de 2,6 cambios de vendajes a la semana).

Conclusiones principales

Menor frecuencia de visitas

- La frecuencia de los cambios de vendajes se redujo de 2 a 3 veces por semana (atención estándar) a una vez por semana.

Resultados clínicos

- El 25 % de las úlceras venosas cicatrizaron en un plazo de 2 a 4 semanas.
- Todos los pacientes presentaron una reducción del edema en las piernas (la circunferencia media del tobillo se redujo de 29,4 cm a 25,1 cm en dos semanas).
- No se observó exudado y los apósitos permanecieron colocados hasta la siguiente visita.

Experiencia del paciente

- Todos los pacientes prefirieron el sistema C2LC.
- El 83 % de los pacientes notificó una disminución del dolor, así como una reducción de la sensación de calor y de la sudoración en las piernas.
- El 75 % de los pacientes comunicó una disminución de la hinchazón, la sensación de humedad y el picor.
- El 67 % experimentó una mejora en los síntomas de pesadez en las piernas.
- El 63 % consideró que la compresión se mantenía en su sitio.
- El 58 % afirmó sentir más comodidad.
- Mejora de la calidad de vida: menos dolor, molestias y aislamiento.


Comentarios sobre los profesionales sanitarios

Todos los médicos prefirieron el C2LC por su facilidad de aplicación y la buena acogida por parte de los pacientes.

Antecedentes clínicos

Paciente: Mujer de 80 años

Temas: Úlcera venosa crónica y eccema venoso, con antecedentes de caídas recurrentes. Imposibilidad de continuar con el tratamiento compresivo previo debido a que el vendaje se clavaba en la piel y se producía sangrado a través de este.

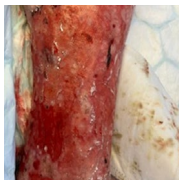Situación inicial	Después de 2 semanas de C2LC + KC-SAD	Después de 3 semanas de C2LC + KC-SAD	Después de 4 semanas de «C2LC + KC-SAD» en la pierna izquierda	Después de 4 semanas de «C2LC + KC-SAD» en la pierna derecha	Estado al alta después de 4 semanas de tratamiento con C2LC+KC-SAD
					• La herida estaba casi cerrada, sin signos de maceración. • Mejora del edema • El paciente solicitó el alta con el sistema de compresión Coban 2 como opción preferida.

Conclusión

La combinación del sistema de compresión Coban 2 y los apósitos superabsorbentes Kerramax Care permitió un manejo eficaz de las úlceras venosas de la pierna con exudado abundante en pacientes hospitalizados.

Los pacientes se beneficiaron de:

- Pocos cambios de vendajes
- Más comodidad

Los médicos señalaron:

- Facilidad de uso
- Gran aceptación por parte de los pacientes

Escanear para leer la presentación del póster médico

Paterson L, Griffin L, Bongards C. Apósitos superabsorbentes con compresión de dos capas para úlceras venosas de la pierna. SAWC Primavera; del 30 de abril al 4 de mayo de 2025; Grapevine, Texas (EE. UU.).

Datos procedentes de un entorno de atención **extrahospitalaria**

Resumen del estudio

Clave

Apósito superabsorbente SOC-SAD (estándar de atención)

KC-SAD
3M™ Kerramax Care™ Apósitos superabsorbentes

C2LC
3M™ Coban™ 2: sistema de compresión de dos capas

En una evaluación a pequeña escala se compararon los apósitos superabsorbentes 3M™ Kerramax Care™ (KC-SAD) con los apósitos superabsorbentes de referencia (SOC-SAD), ambos utilizados junto con el sistema de compresión de dos capas 3M™ Coban™ 2 (C2LC) en pacientes con úlceras venosas de la pierna con elevada exudación.

Método: 2 semanas de SOC-SAD + C2LC → 4 semanas de KC-SAD + C2LC.

Objetivos: Evaluar los resultados clínicos y los resultados comunicados por los pacientes, y estimar el impacto en los costes de la atención sanitaria del KC-SAD en comparación con el SOC-SAD.

Entorno: Atención extrahospitalaria, Escocia.

Diez pacientes con úlceras venosas de la pierna (UVP) muy exudativas, tratadas anteriormente con diferentes sistemas de compresión.

Conclusiones principales

Menor frecuencia de visitas

- SOC-SAD: 2,04 visitas a la semana.
- KC-SAD: 1,8 visitas a la semana.

Mejores resultados clínicos: el 50 % (5/10) de las heridas tratadas con SOC-SAD + C2LC no presentó mejoras clínicas o solo mejoras leves, mientras que se observó una evolución positiva de la cicatrización en el 100 % (9/9) de las heridas tratadas con KC-SAD + C2LC.

Mejora en el tratamiento del exudado

- En el 78 % de los casos, los apósitos Kerramax Care no presentaron fugas o estas fueron mínimas.
- Menos episodios de traspaso de exudado.
- El tamaño del apósito se adaptó a la evolución de la herida, manteniendo una saturación adecuada con Kerramax Care.

Mejora de la calidad de vida de los pacientes

- Menos dolor, fugas, molestias y sensación de calor y humedad.
- El 100 % de los pacientes indicó que los apósitos Kerramax Care, utilizados junto con el sistema de compresión Coban 2, permanecieron en su sitio durante todo el tratamiento.

Antecedentes clínicos

Paciente: 84 años; **Problemas:** el paciente padecía dolor diario con SOC-SAD; **Tamaño inicial** de **la herida:** 55,3 cm^2; **tamaño de la herida:** antes o después de KC-SAD+C2LC SOC-SAD + C2LC: 29,7 cm^2.

Situación inicial	Después de 1 semana de SOC-SAD + C2LC	Después de 2 semanas de SOC-SAD + C2LC	Después de 1 semana de KC-SAD + C2LC	Después de 2 semanas de KC-SAD + C2LC	Después de 3 semanas de KC-SAD + C2LC	Después de 4 semanas de KC-SAD + C2CL
						• **Cierre total de la herida** • **El paciente ha sido trasladado a la sala de cuidados de mantenimiento**

Conclusión

La evaluación sugiere que el uso combinado de Kerramax Care y Coban 2 puede aportar beneficios en los resultados clínicos, la comodidad del paciente y la optimización de recursos. Estos resultados respaldan su uso como una opción terapéutica valiosa para el manejo de úlceras venosas de la pierna con exudado abundante.

Los pacientes se beneficiaron de:


- Mejora de la calidad de vida
- Experiencia sin dolor

Los médicos señalaron:

- Ahorro de costes
- Mejora de los resultados clínicos

Escanear para leer la presentación del póster médico

Optimización de los protocolos de atención para el manejo de úlceras venosas con exudado abundante en distintos entornos asistenciales.

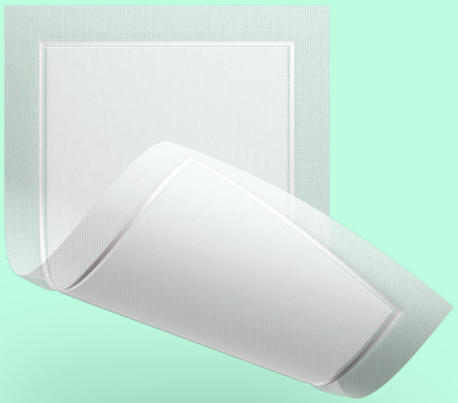

+



3M™ Kerramax Care™
Apósitos superabsorbentes

3M™ Coban™ 2
Sistema de compresión de dos capas

Escanee el QR para obtener más información sobre cómo optimizar las VLU o visite Solventum.com para obtener más información.

solventum

Solventum
Medical Surgical Business
KCI Clinic Spain S.L.U.
Edificio Dublín
Via Dublin, 7 - 2ª Planta,
28042 Madrid

© Solventum 2026. Todos los derechos reservados. Solventum y el logotipo «S» son marcas comerciales de Solventum o de sus filiales. 3M y el logotipo de 3M son marcas comerciales de 3M Company. OMG2195792.