

3M™ Nenä- mahaletkun kiinnityssidos


Suunniteltu luotettavaan
nenä-mahaletkun kiinnittämiseen
helppokäyttöisellä ratkaisulla, joka
auttaa ehkäisemään painevaurioita
ja minimoimaan liimakiinnitykseen
liittyvän ihovaurion riskin.

Liimaton alue nenän juuressa

Sallii letkun roikkua
vapaasti, jotta se tulee
vähemmän kosketuksiin
ihon kanssa.

Läpinäkyvä

Ihon kuntoa ja letkun
asentoa voidaan arvioida
irrottamatta kiinnityssidosta.

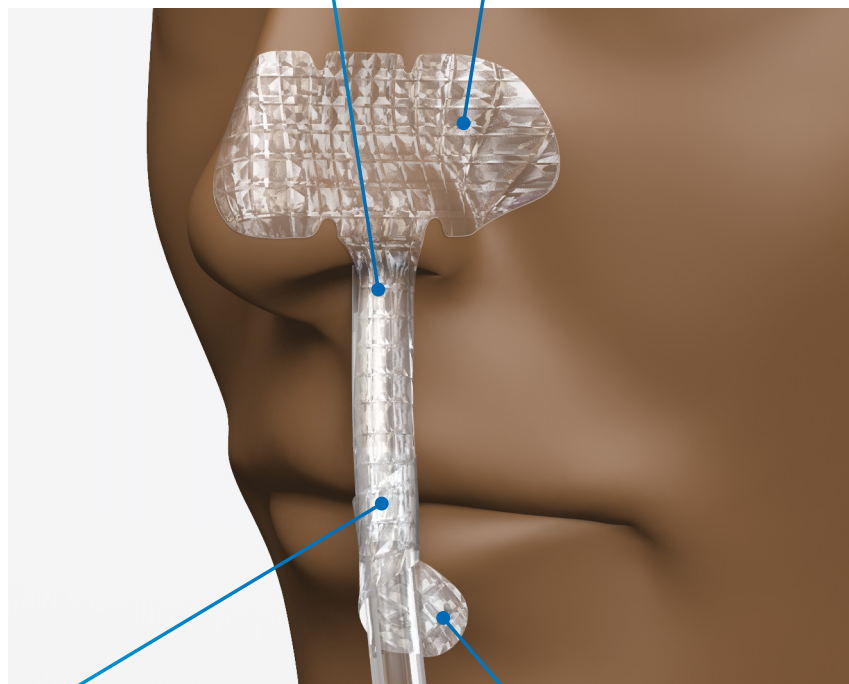

Kuituverkkokotausta

Parantaa lujuutta.

Liimaton uloke irrotusta varten

Irtoaa yhtenä
kappaleena.



Toimivuus iholla: Höyhenmerkki kuvaa tuotteita, joilla on
tarvittava kiinnitysteho, mutta ihovaurion riski on minimoitu.

Luotettava kiinnitys

Ainutlaatuinen sidosaine
nenä-mahaletkun
kiinnitykseen kuivaihoiselle.
Kestää jopa 48 tuntia siirtyen
paikaltaan korkeintaan
minimaalisesti, vaikka
kastuisi tai rasvoittuisi.

Helppokäyttöisyys

Kaksiosainen
taustapaperi takaa helpon
kiinnityksen suojäkäsineet
kädessä; liimaton
uloke liepeen kärjessä
mahdollistaa vaivattoman
irrotuksen. Standardoituun
tekniikkaan sopiva.

Hellävarainen iholle

Herkistämätön liima-aine
ei yleensä aiheuta
ihottumaa. Se minimoi
kivun ja ihovauriot
irrotettaessa.^{1,2}

Suunniteltu minimoimaan painevaurion riski

Liimaton alue on
suunniteltu minimoimaan
sierainaukon juureen
kohdistuva paine, ja
läpinäkyvyys mahdollistaa
ihon kunnan seurannan.

1. 3M asiakirja-aineisto. EM-05-014937.


2. 3M asiakirja-aineisto. EM-05-014954.

Valitsetpa teipin tai muun kiinnityksen, valitun kiinnitysratkaisun pitäisi varmistaa letkujen kiinnitys ja ehkäistä siirtymistä, jotta nenä-mahayhteys ei häiriinny. Lue, miten 3M™ Nenä-mahaletkun kiinnityssidos menestyi vertailevassa tutkimuksessa.

3M™ Nenä-mahaletkun kiinnityssidoksen vertailu Hollister®-kiinnitysvälineeseen.¹

Varmempi kiinnitys:

3M™ Nenä-mahaletkun kiinnityssidosta käytettäessä oli tilastollisesti suurempi todennäköisyys, että sidokset pysyivät paremmin iholla kuin Hollister®-kiinnitysvälinettä käytettäessä 48 tunnin ja 72 tunnin käytön jälkeen.*

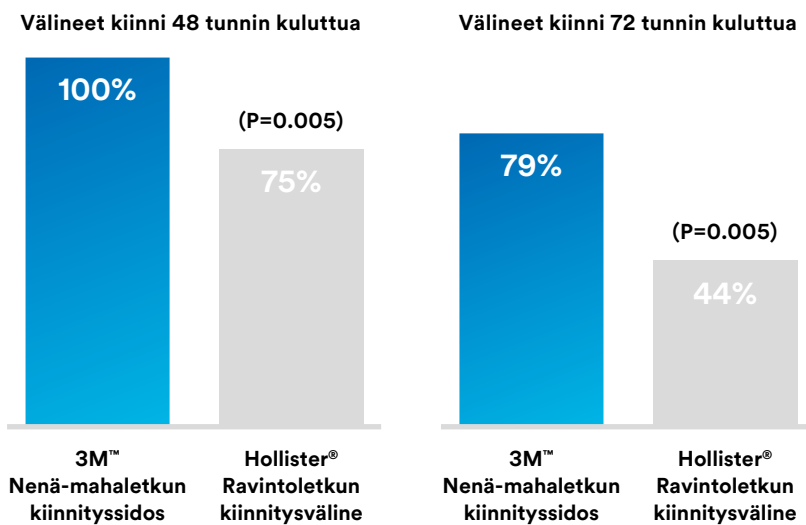

Vähemmän siirtymää:

3M™ Nenä-mahaletkun kiinnityssidos oli siirtynyt 60 % vähemmän kuin Hollister®-kiinnitysväline 72 tunnin jälkeen.**



Varma valinta. Voit luottaa siihen, että 3M™ Nenä-mahaletkun kiinnityssidos pysyy paikallaan tukevasti ja hellävaraisesti.

Tilaa 3M Health Care -myyntiedustajaltasi tai soita 3M Health Care -asiakastukeen numeroon (09) 525 21. Lisätietoa saat osoitteesta 3M.com/Medical.

Perehdy muihin tärkeisiin tietoihin lukemalla tuotteen käyttöohjeet.

Tilaustiedot

Tuote	Tuotenimi	Tuotenumero	Koko	Välinettä/ rasia	Rasiaa/ kuljetuspakkaus
	3M™ Nenä-mahaletkun kiinnityssidos, L-koko	1501NG	5,7 cm x 7,3 cm	50	4
	3M™ Nenä-mahaletkun kiinnityssidos, S-koko	1500NG	4,5 cm x 4,7 cm	50	4

Suomen 3M Oy
Medical Solutions Division
Keilaniementie 1
02150 Espoo
(09) 525 21

* Prospektiivinen, vertaileva tutkimus 64 terveellä tutkittavalla 3 päivän käytön ajan.

** 50 gramman paino ripustettiin kustakin välineestä 15 minuutiksi päivässä letkun simuloimiseksi. Prosenttiosuudet saatiin mittaamalla, mikä osuus välineistä oli siirtynyt paikaltaan: 30 % (3M) ja 78 % (Hollister).

3M asiakirja-aineisto. EM-05-014984. © 2022 3M. Kaikki oikeudet pidätetään. 3M ja muut tavaramerkit ovat suojattuja. Luvaton käyttö kielletty. 3M-tavaramerkkejä käytetään luvanvaraisesti Kanadassa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. GL_ENG_70-2013-1340-3

