


3M™ Tegaderm™ CHG Klooriheksidiiniglukonaatti I.V. Port -suojausidos

Syöpäpotilaat ovat haavoittuvaisia – ja infektioiden torjunnassa käyttämälläsi sidoksella on todella merkitystä. Tegaderm™ CHG I.V. Port -suojausidokset on suunniteltu erityisesti implantoiduille laskimoporteille, ja ne tarjoavat sekä antimikrobisen suojan että potilaiden ansaitseman mukavuuden.

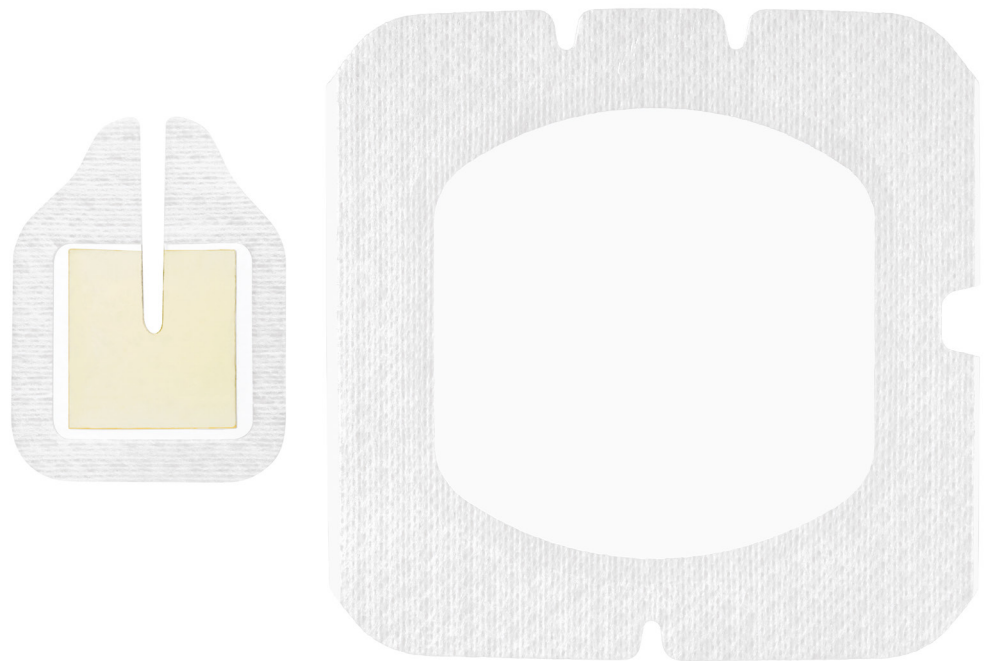

Pistokohdan näkyvyys

Läpinäkyvä sidos ja geelityyny mahdollistavat aikaisen pistokohdan komplikaatioiden havaitsemisen.


Kiinnitetään paikoilleen aina samalla tavoin

Integroitu CHG-geelityyny ja sidos on suunniteltu varmistamaan standardoitu ja oikea kiinnittäminen.¹

Katetrin turvallinen kiinnitys

Suunniteltu minimoimaan katetrin liikkuminen ja irtoaminen.

3M™ Tegaderm™ CHG Klooriheksidiiniglukonatti I.V. Port -suojsidos

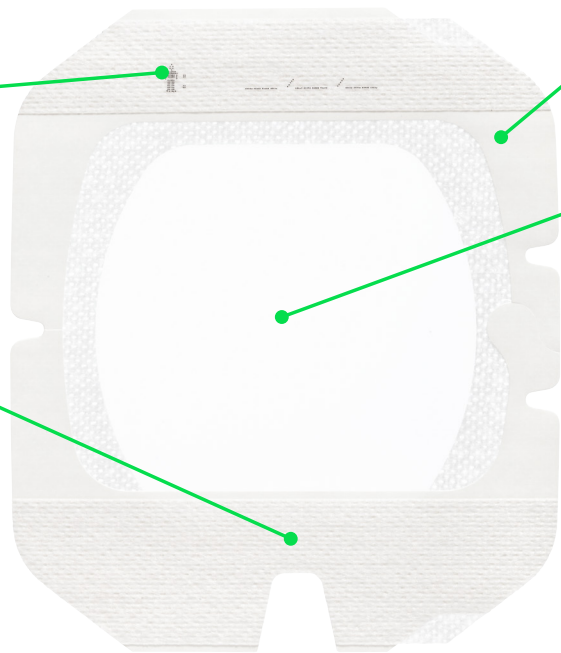

Teippiliuska sidoksenvaihdon kirjaamiseen

- Valmiiksi painettu teksti sidoksen vaihdon kirjaamista varten.
- Tarjoaa lisäkiinnitystä letkuille

Kiinnitysteippi liuska

- Lovellinen liuska sidoksen reunojen sulkemiseen ja letkujen kiinnitykseen
- Haavakalvon pinnoite suojaa sitä likaantumiselta ja ulkoisilta kontaminanteilta

Vahvistettu, vakauttava reunus

Läpinäkyvä haavasidos liimattomalla ikkunalla

- Steriili suoja
- Suojasidos tarjoaa erinomaisen suojan ulkoisilta kontaminanteilta, mukaan lukien nesteet (vedenkestävä)
- Erittäin hyvin hengittävä, antaa kosteuden haihtua
- Mahdollistaa jatkuvan pistokohdan tarkkailun

Sopii myös useille Huber-neuloille.

Klooriheksidiiniglukonaatti (CHG) geelityyny

- Tarjoaa välittömän ja jatkuvan suojan verisuoni-infektioihin yhdistetyiltä mikro-organismeilta^{1,2}
- Suunniteltu muotoutumaan neulan ympärille - pysyy paikoillaan ja kiinni iholla
- Säilyttää läpinäkyvyytensä ja suojaa jopa silloin, kun sidoksen alla on verta, suolaliuosta tai haavaeritteitä



3M™ Tegaderm™ Klooriheksidiiniglukonaatti (CHG) I.V. Port -suojasidos

Tuotenimi	Tilausnumero	Koko	Kpl/rasia	Rasioita/kuljetuspakkaus
3M™ Tegaderm™ CHG Klooriheksidiiniglukonaatti I.V. Port -suojasidos	1665R	CHG geelityyny: 6.2cm x 4.9cm Haavasidos: 12cm x 12cm	25 sidosta + haavatynnyä/rasia	4 rasiaa/kuljetuspakkaus
3M™ Tegaderm™ Läpinäkyvä haavasidos haavaan tarttumattomalla ikkunalla	1668	Sidos: 12cm x 12cm	25 sidosta/rasia	4 rasiaa/kuljetuspakkaus

Tärkeää turvallisuustietoa 3M™ Tegaderm™ CHG Klooriheksidiiniglukonaatti I.V. Port -suojasidoksesta

Älä käytä Tegaderm™ CHG I.V. Port -suojasidosta keskosilla tai alle kahden kuukauden ikäisillä vauvoilla. Tämän tuotteen käyttö keskosilla voi johtaa yliherkkyyssreaktioihin tai ihon nekroosiin. Tegaderm™ CHG I.V. Port -suojasidoksen turvallisuutta ja tehoa ei ole testattu alle 18-vuotiailla lapsilla. Kaikki tarkemmat tuotetiedot löytyvät käyttöohjeista (IFU).

1 Hensler JP, Schwab DL, Olson LK, Palka-Santini M. Growth inhibition of microorganisms involved in CRBSIs by an antimicrobial transparent I.V. dressing containing chlorhexidine gluconate (CHG). Poster session presented at: 19th Annual Conference of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2009; May 16–19, 2009.

2 Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections, 2011. <http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/guidelines/bsi-guidelines-2011.pdf>.



Solventum
Medical Surgical
Keilaniementie 1
02150 ESPOO
09-525 21

Lisätietoja verkkosivuiltamme www.solventum.com/fi tai ottamalla yhteyttä paikalliseen Solventum yhteyshenkilösi tai soittamalla +358-9-525 21.

© Solventum 2025. Solventum, S logo ja muut tavaramerkit ovat Solventumin tai sen kumppanien omaisuutta. 3M, 3M logo ja muut 3M:n omistamat ja/tai lisensioimat tavaramerkit ovat 3M Company:n omaisuutta. OMG1526798.