



La confiance dont vos patients ont besoin

Le pansement superabsorbant en lequel vous pouvez avoir confiance.

Le Pansement superabsorbant Kerramax Care^{MC} 3M^{MC}

Le Pansement superabsorbant Kerramax Care^{MC} 3M^{MC} améliore à la fois la qualité des soins et l'expérience des patients



Les plaies présentant une forte exsudation posent problème tant pour le clinicien que pour le patient. Un excès de liquide peut compliquer l'obtention d'un équilibre optimal de l'humidité et entraîner une macération.

La prise en charge des plaies présentant une forte exsudation est essentielle pour améliorer la qualité de vie des patients. Les patients souffrant de plaies chroniques à forte exsudation, comme les ulcères de la jambe, peuvent grandement bénéficier de soins complets qui tiennent compte à la fois de leur bien-être physique et émotionnel¹. Un traitement et un soutien efficaces peuvent contribuer à favoriser une attitude plus positive et plus confiante.

Le Pansement Kerramax Care donne la confiance aux cliniciens de relever les trois principaux défis posés par les plaies à forte exsudation

Défi

1

Prise en charge efficace de l'exsudat

Défi

2

Changements de pansement non planifiés

Défi


3

Mauvaise expérience du patient



Pansement superabsorbant Kerramax Care^{MC} 3M^{MC}

Le Pansement superabsorbant Kerramax Care^{MC} 3M^{MC} doté de la Technologie Exu-Safe^{MC} peut aider les cliniciens et les patients à surmonter les défis associés aux plaies présentant une forte exsudation²⁻⁴.

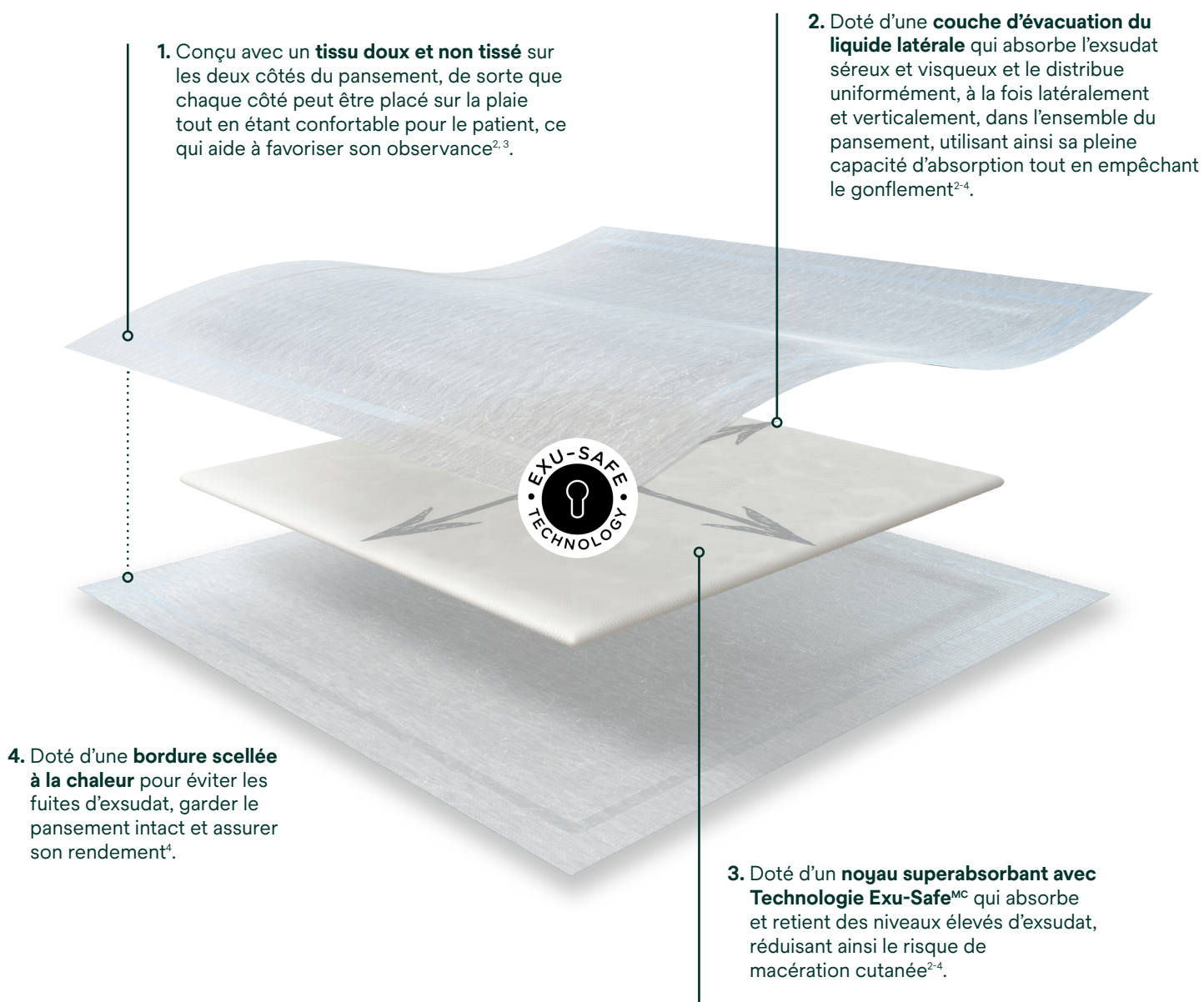


Solution

1

Améliorer les soins en prenant en charge efficacement l'exsudat

Le Pansement superabsorbant Kerramax Care^{MC} 3M^{MC} absorbe des niveaux élevés de liquide séreux et visqueux et les retient loin de la peau périlésionnelle et du lit de la plaie, ce qui aide à réduire le risque de macération cutanée, même sous compression²⁻⁴.

Comment cela fonctionne-t-il?

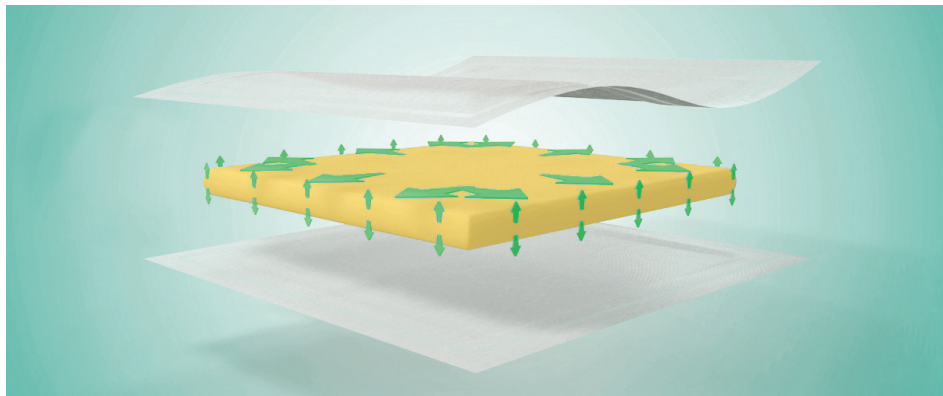

La couche d'évacuation du liquide latérale absorbe l'exsudat uniformément dans tout le pansement, sans blocage de gel^{3,4} qui pourrait mener à des fuites.

Une capacité d'absorption élevée des fluides peut permettre de réduire le nombre de changements de pansement et de minimiser la perturbation du lit de la plaie^{2,3}.

Une prise en charge efficace et éprouvée de l'exsudat

Une étude d'évaluation clinique sur 101 patients présentant des plaies à forte exsudation d'étiologies diverses a révélé que² :



71 %

du personnel infirmier des patients ont accordé une note entre 8 et 10 (sur une échelle de 10 points) à la capacité de **prise en charge de l'exsudat** du Pansement Kerramax Care par rapport à leur choix de pansement habituel.



78 %


des patients ont signalé une **amélioration de l'état de la peau environnante** et une **diminution de la macération** pendant le traitement.

À titre d'illustration seulement; ne vise pas à représenter les patients étudiés.



Le saviez-vous?

Le Pansement Kerramax Care retient l'exsudat même sous compression, contribuant ainsi à protéger les tissus délicats de la plaie, les bords de la plaie et la peau environnante²⁻⁴. Grâce à la Technologie Exu-Safe^{MC} dans le noyau du pansement, le pansement aide également à séquestrer les bactéries et les métalloprotéases matricielles (MPM) présentes dans le liquide de la plaie et à absorber ces menaces^{5*}.

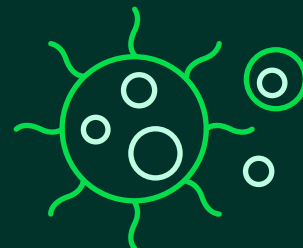


* Comme démontré *in vitro*, la pertinence clinique n'a pas été étudiée.

Solution 2

Réduire le nombre de changements de pansement non planifiés


Choisir le bon pansement est essentiel pour obtenir une bonne cicatrisation et pour minimiser la fréquence des changements de pansement, permettant ainsi à la cicatrisation de procéder sans perturbation.

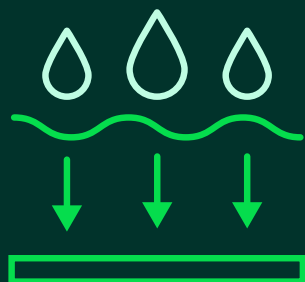


La capacité élevée d'absorption et de rétention du Pansement superabsorbant Kerramax Care^{MC} 3M^{MC} permet de réduire le nombre de changements de pansement et de minimiser les perturbations du lit de la plaie^{2,3}.

L'expérience des professionnels de la santé avec le Pansement Kerramax Care

Lors d'une évaluation de 101 patients présentant des plaies à forte exsudation d'étiologies diverses, on a demandé l'opinion de professionnels de la santé quant à l'adéquation du Pansement Kerramax Care² :

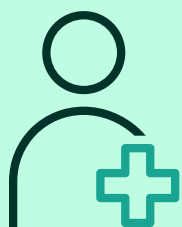

94 %
des patients ont
déclaré que le
pansement a répondu
à leurs attentes ou les
a dépassées²

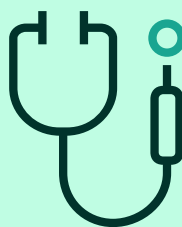

90 %
des patients voudraient bien
conserver le Pansement
Kerramax comme
premier choix²

Quelle quantité de liquide le Pansement Kerramax Care peut-il absorber*?



Données internes : LODHI, N. et D. WARDE. « Free-swell absorbency testing », CHC R839 (2019).

Solution 3

Améliorer l'expérience des patients

Les ulcères de la jambe, accompagnés de douleurs et d'odeurs, ont des répercussions considérables sur la qualité de vie des patients et peuvent entraîner une dépression, une forte anxiété et des sentiments de solitude et d'isolement social.

Améliorer l'expérience des patients

Le Pansement superabsorbant Kerramax Care^{MC} 3M^{MC} est conçu pour favoriser le confort des patients^{2,3}. Dans une récente étude clinique portant sur la prise en charge des plaies à forte exsudation dans la communauté, le Pansement Kerramax Care a été évalué selon l'expérience du patient en matière de confort. Un total de 101 patients ont été évalués selon un éventail d'étiologies de plaies².

70 % 
des
patients

ont accordé une note entre 8 et 10 au pansement en matière de confort, illustrant un **haut niveau de confort** et une **expérience positive du patient**².



Le Pansement superabsorbant Kerramax Care se jumelle exceptionnellement bien avec une thérapie de compression




La **conception mince** du Pansement Kerramax Care et sa capacité à absorber et à retenir l'exsudat, même sous une thérapie de compression^{4,6}, en font un excellent choix pour aider les cliniciens et les patients dans la prise en charge des ulcères veineux de la jambe (UVJ)²⁻⁴.

Wounds International a récemment publié huit études de cas évaluant le rendement clinique du Pansement Kerramax Care et du Système de bandage compressif à deux couches Coban^{MC} 2 3M^{MC}. Les résultats montrent que les patients atteints d'un UVJ traités dans différents contextes de soins étaient satisfaits de la combinaison des traitements. Il a été signalé que le Pansement Kerramax Care est resté en place pendant le temps de port sous compression, qu'il a retenu l'exsudat et qu'aucune pénétration ni aucune fuite n'a été observée⁴.

Technique de pli pour le Pansement superabsorbant Kerramax Care^{MC} 3M^{MC}

Le Pansement Kerramax Care est très souple et peut être plié pour convenir à une variété de plaies.

Entre les doigts et les orteils

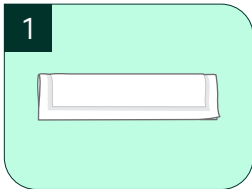


1
Plier le pansement de 10 cm x 22 cm en deux dans le sens de la longueur.




2
Faire entrecroiser le pansement entre les orteils ou les doigts.


Talon et coude

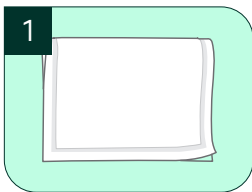


1
Plier le pansement de 10 cm x 22 cm en deux.

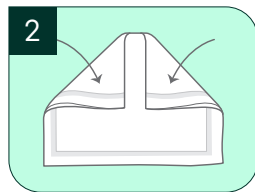

2
Plier chaque coin vers l'intérieur.

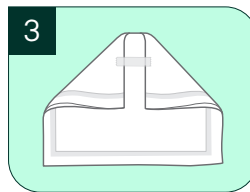

3
Appliquer du ruban pour fixer les coins pliés.

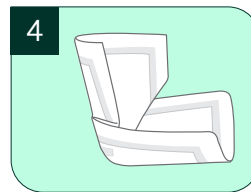


4
Ouvrir le pansement plié.



5
Placer sur le talon ou le coude.

Jambe et bras

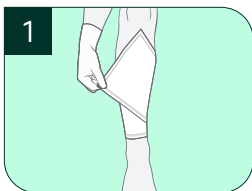

1
Placer le pansement de 20 cm x 50 cm sur la base du bras ou de la jambe.



2
Enrouler le pansement autour de la jambe ou du bras.



3
Superposer le pansement pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'espaces.




4
Fixer le pansement avec du ruban ou un bandage compressif.



Le saviez-vous?

Le Pansement Kerramax Care est aussi offert avec une bordure adhésive. Si vous avez besoin d'un pansement superabsorbant autoadhésif, veuillez envisager le Pansement à bordure douce Kerramax Care^{MC} 3M^{MC}.

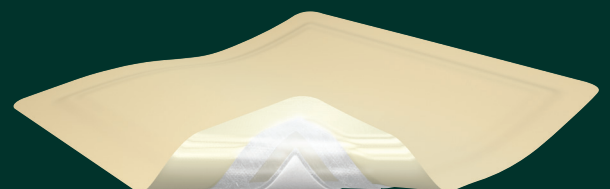

Aperçu du Pansement superabsorbant Kerramax Care^{MC} 3M^{MC}



Absorbe et retient des niveaux élevés d'exsudat^{2,3}



Doux, très souple et pliable dans une conception mince⁶



Aide à séquestrer les bactéries et les MPM dans la couche interne du pansement^{5*}



Les deux côtés du pansement peuvent être appliqués sur la plaie



Peut être utilisé sous compression⁴



Peut demeurer en place jusqu'à sept jours

* Comme démontré *in vitro*, la pertinence clinique n'a pas été étudiée.

Renseignements pour commander

Pansement superabsorbant Kerramax Care^{MC} 3M^{MC}

N° de référence	Format	Pansements par boîte
PRD500-025	5 cm x 5 cm (2 po x 2 po)	10
PRD500-050	10 cm x 10 cm (4 po x 4 po)	10
PRD500-100	13,5 cm x 15,5 cm (5 po x 6 po)	10
PRD500-120	10 cm x 22 cm (4 po x 9 po)	10
PRD500-240	20 cm x 22 cm (8 po x 9 po)	10
PRD500-380-B10	20 cm x 30 cm (8 po x 12 po) (paquet en vrac)	10
PRD500-600-B10	20 cm x 50 cm (8 po x 20 po) (paquet en vrac)	10

Pansement superabsorbant avec bordure adhésive Kerramax Care^{MC} 3M^{MC}

N° de référence	Format	Pansements par boîte	Boîtes/caisse
CWL1000	16 cm x 16 cm (6 po x 6 po)	5	12
CWL1001	16 cm x 26 cm (6 po x 10 po)	5	36
CWL1002	26 cm x 26 cm (10 po x 10 po)	5	25

Communiquez avec le représentant commercial de Solventum de votre région pour obtenir de plus amples renseignements.

REMARQUE : Il existe des indications, des contre-indications, des mises en garde, des précautions et des renseignements sur la sécurité propres à ces produits et thérapies. Veuillez consulter un clinicien et les directives d'utilisation du produit avant l'utilisation.

Bibliographie :

1. PLATSIDAKI, E., A. KOURIS et C. CHRISTODOULOU. « Psychosocial Aspects in Patients With Chronic Leg Ulcers », *Index Wounds*, vol. 29, n° 10 (octobre 2017), p. 306-310, ISSN 1044-7946.
2. HUGHES, M. A. et J. JONES. « A large-scale evaluation of managing moderate and highly exuding wounds in the community », *Wounds UK*, vol. 13, n° 3 (2017), p. 78-85.
3. JONES, J. et J. BARRAUD. « An evaluation of Kerramax Care in the management of moderate to heavily exuding wounds », *British Journal of Community Nursing*, mars 2014, supplément, S8, p. S50-53.
4. HUGHES, M. A., et coll. « 3M™ Kerramax Care™ Super Absorbent Dressing and 3M™ Coban™ 2 Two-Layer Compression System case series supplement », *Wounds International* (2022), Londres, au R.-U.
5. SINGH, G., C. BYRNE, H. THOMASON et A. MCBAIN. « Investigating the microbial and metalloprotease sequestration properties of superabsorbent wound dressings », *Scientific Reports*, vol. 12, n° 1 (2022), 4747.
6. JACKSON, S., J. LOVETT et C. STEPHENSON. « An assessment of the conformability of superabsorbent dressings », affiche présentée à la conférence annuelle de *Wounds UK* (2016), au R.-U.

Produits offerts au Canada par :



La Compagnie Soins de santé 3M Canada limitée
75, promenade Courtneypark O., local 4
Mississauga (Ontario)
L5W 0E3
Canada
Téléphone : 1 833 954-0525
Site Web : 3M.ca/Medicales

© Solventum, 2024. Solventum et le logo S sont des marques de commerce de Solventum ou de ses sociétés affiliées. 3M est une marque de commerce de 3M. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. CA_FR_70-2013-1463-3