



Solutions de stérilisation


Attest^{MC}

Assurance de stérilisation 3M

VH202

Indicateur chimique trimétrique de stérilisation au peroxyde d'hydrogène vaporisé Attest^{MC} 3M^{MC}, type 4

Non traité

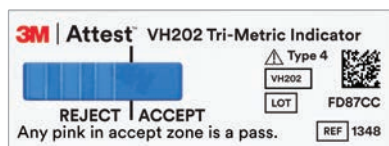


Les Indicateurs chimiques trimétriques de stérilisation au peroxyde d'hydrogène vaporisé Attest^{MC} 3M^{MC} de type 4 sont conformes à la norme ISO 11140-1:2014.

Produits offerts au Canada par :


La Compagnie 3M Canada
Division des
solutions médicales
300, rue Tartan
London (Ontario) N5V 4M9
Canada
1 800 364-3577
3M.ca

La Compagnie 3M
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN 55144
États-Unis
1 800 228-3957


Traité

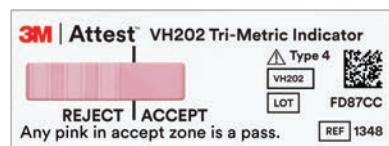


Réussite

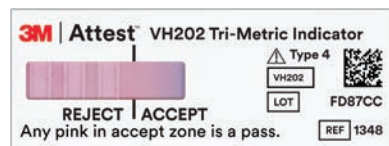

Réussite

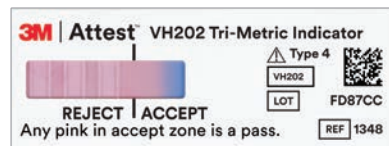

Réussite

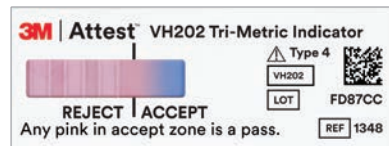

Réussite

Comparaison d'échantillons

Si un changement de couleur vers le rose a pénétré dans la zone « Accept », l'essai est considéré comme réussi.

Traité



Échec



Échec



Échec

Comparaison d'échantillons

Si un changement de couleur vers le rose n'a pas pénétré dans la zone « Accept », l'essai est considéré comme un échec.

Veuillez vous reporter aux directives d'utilisation pour obtenir plus de renseignements.