solventum

INNOVATION

Pansement Solventum™ V.A.C.® Peel and Place

En toute simplicité, étendez l'application de la thérapie V.A.C.®



3M™ Prevena™ Plus

3M™ ACTIV.A.C.™

3M™ V.A.C.® Ulta Home

Compatibilité avec les unités Solventum™

Pansement V.A.C.® Peel & Place

En toute simplicité, étendez l'application de la thérapie V.A.C.®

Inspiré par les soignants, pensé pour les patients

Efficacité jusqu'à 7 jours[1]

Le film protecteur, perforé et non adhérent sous la mousse permet **une tenue efficace jusqu'à 7 jours** et ainsi une **diminution** de la fréquence de **change du pansement**.



Rapidité d'application < 2 minutes[2]

Conçu pour couvrir la plaie et les tissus environnents, le **pansement V.A.C. ® Peel & Place** assure une application facile et rapide à tous les soignants.


Efficacité reconnue de la thérapie V.A.C.® [3]

Effet de macrodéformation et de microdéformation **homogène et uniforme** sur l'ensemble de la plaie

Conception simple tout-en-un

Repositionnable grâce au champ adhésif 3M™ Dermatac™

Le tout premier film hybride en silicone et acrylique pour un **retrait en douceur** et une **étanchéité optimale**.

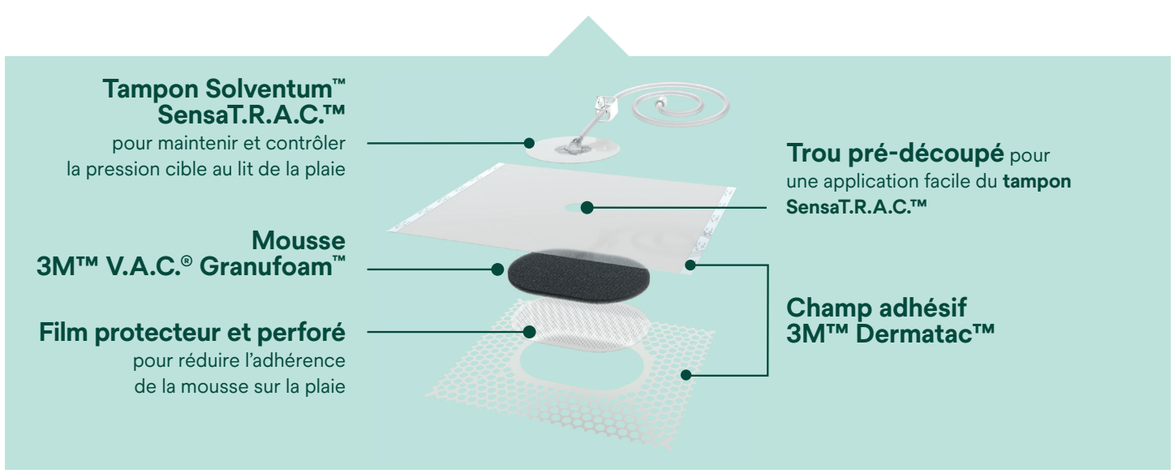

Extension des indications accessibles à la thérapie V.A.C.®

INDICATIONS	
• Plaies de forme irrégulière	• Escarres III & IV
• Ulcères de jambe	• Toutes les plaies d'une profondeur inférieure à 6 cm, avec un décollement inférieur à 2 cm, sans tunnelisation
• Ulcères du pied diabétique	
• Greffes / Lambeaux	

Pansement V.A.C.® Peel & Place

En toute simplicité, étendez l'application de la thérapie V.A.C.®

Impact économique optimisé sur l'organisation des soins des plaies [4]

Réduction de

74% de recours à l'infirmier(e)

Diminution de

75% du nombre de changements de pansements*

* En se basant sur un changement hebdomadaire de 4 pansements standards contre 1 pansement V.A.C.® Peel and Place

Augmentation de

23% des recettes journalières par GHM*

* Moyenne de 4 GHM - plaies complexes

Cas clinique

Un patient diabétique qui a reçu une piqûre d'araignée sur l'avant-bras. Suite au développement d'une cellulite, les professionnels de santé ont débridé la plaie et appliqué un greffon.


Plaie (J1)	Application du pansement	Plaie (J5)
		

Application rapide et facile

La mousse doit s'étendre au-delà de la plaie et dépasser sur la peau périlésionnelle d'environ 1,5 cm.



Le décollement doit être ≤ 2 cm et il ne doit pas y avoir de tunnellesition.

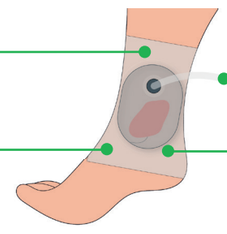

Pour déporter, sélectionner la taille de pansement "Large".

Ne pas ajouter d'autres pansements ou de mousses de remplissage.

solventum


Unités de thérapie		Références
	3M™ Prevena™ Plus	PRE4010
	3M™ ActiV.A.C.™	340006
	3M™ V.A.C.® Ulta Home	HCULTDEV01/FR

Réservoirs 3M™ V.A.C.®		Références & conditionnements
	Réservoir 150 ml Prevena™ Plus	PRE4095 Carton de 5
	Réservoir 300 ml pour utilisation avec l'unité de thérapie 3M™ ActiV.A.C.™ et 3M™ V.A.C.® Ulta Home	M8275058/10 Carton de 10
	Réservoir 500 ml pour utilisation avec l'unité de thérapie 3M™ V.A.C.® Ulta Home	M8275063/10 Carton de 10
	Réservoir 1000 ml pour utilisation avec l'unité de thérapie 3M™ V.A.C.® Ulta Home	M8275093/5 Carton de 5

Kit de pansements V.A.C.® Peel & Place (Tampon SensaT.R.A.C.™ inclus)

Nom du produit et références	Profondeur maximale de la plaie	Taille de la mousse	Taille du pansement	Emplacement du trou prédécoupé	Conditionnement
Petit EZ5SML	≤ 2 cm	6,1 cm 8,6 cm	16,9 cm 20,6 cm	Centré	Carton de 5
Moyen EZ5MED	≤ 4 cm	11,1 cm 16,6 cm	23,7 cm 29,2 cm	Centré	
Grand EZ5LRG	≤ 6 cm	13,6 cm 24,2 cm	26 cm 35,6 cm	Déporté	

Tout savoir sur l'innovation Solventum™ V.A.C.® Peel & Place

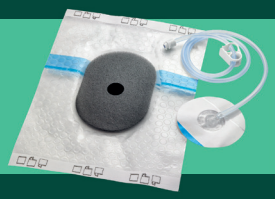

Service Client Solventum TPN

Par téléphone : 08 00 47 83 47
Astreinte technique disponible 24h/24 & 7J/7
Mail : kcifrserviceclient@solventum.com

Une réactivité unique

- Mise à disposition du matériel dans le service
- Livraison des unités de thérapie et des consommables à J+1 pour les commandes passées avant 15 h 30.
- Contrôle et nettoyage des unités certifiés
- Dépannage possible dans un délai de 3 heures en France métropolitaine hors Corse et sous réserve de disponibilité (sites de stockage disséminés sur la France métropolitaine)
- Livraison urgente possible dans la journée sous certaines conditions (FSL)

© 2025, Solventum. Solventum, le logo S sont des marques déposées de Solventum. Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Pansements 3M™ V.A.C.® : Dispositifs médicaux de classe IIa ou IIb selon la référence, CE 2797. Unité de Thérapie 3M™ ActiV.A.C.™, 3M™ V.A.C.® Ulta , Prevena™ Plus 125, Film 3M™ V.A.C.® : Dispositifs Médicaux de classe IIa ou IIb selon la référence, CE 2797. Fabricant KCI USA. Lire attentivement la notice avant toute utilisation. Distribués par Solventum France, 1 Parvis de l'Innovation, 95006 Cergy-Pontoise cedex. Med-Surg-411 Juillet 2025.

1. SAT-BSER-05-869347 V.A.C.® Peel and Place (Ganymede) BSER.
2. In a simulated use test with 12 nurse and surgeon users. Average dressing application time of 01:48. SAT-MTF-05-995965 Marketing study for 3M V.A.C.® Peel and Place Dressing. 2023
3. SAT-MTF-05-982101 Evaluation of 3M™ V.A.C.® Peel and Place Dressing Concepts in Full-Thickness Excisional Wounds. 2023. Allen D, Robinson T, Schmidt M, Kieswetter K. Preclinical assessment of novel longer-duration wear negative pressure wound therapy dressing in a porcine model. Wound Rep Reg. 2023;31;S3:349-359.
4. Simulation médico-économique réalisée par Solventum France (Juin 2025) non contractuelle visant à présenter le bénéfice hypothétique du pansement V.A.C.® Peel and Place.

SOLVENTUM FRANCE - MEDICAL SURGICAL DIVISION
1 parvis de l'innovation 95006 Cergy Pontoise