



Wskaźniki chemiczne
3M™ Attest™ typ 5 do pary wodnej
1243A, 1243B, 1243RE

Wyniki łatwe w odczycie.

Innowacyjna technologia 3M CI ułatwia pracę ze sterylnymi pakietami.

3M sprawia, że uzyskanie informacji o prawidłowej sterylizacji narzędzi i urządzeń chirurgicznych w parze wodnej jest szybsze i łatwiejsze. Integratory chemiczne typu 5, 3M™ Attest™ zapewniają pewność wyniku, teraz z ulepszonym, wyróżniającym się wyglądem i łatwiejszym odczytem.



Łatwy do zauważenia.
Żywe kolory ułatwiają lokalizację.



Obiektywny odczyt wyników.
Technologia wędrującej substancji wskaźnikowej eliminuje czas poświęcany na interpretację zmiany barwy.



Zwiększona wydajność.
Wystarczy, że zeskanujesz kod kreskowy, aby załadować informacje do systemu śledzenia narzędzi twojego szpitala.



Wytrzymały materiał.
Gruba folia aluminiowa została zaprojektowana z przeznaczeniem do wytrzymywania skrajnych warunków panujących podczas sterylizacji parowej.



3 z 4

członków personelu sali operacyjnej

potwierdza, że Integratory chemiczne typu 5 3M™ Attest™ są łatwiejsze do odnalezienia w opakowaniu sterylizacyjnym w porównaniu do marek konkurencyjnych.¹

66%

uważa, że wyniki są łatwiejsze w odczycie




66% personelu sali operacyjnej twierdzi, że wyniki są łatwiejsze w odczycie w przypadku integratorów chemicznych typu 5 3M™ Attest™.

Wskaźnik chemiczny typu 5 3M™ Attest™ do pary wodnej.

Porównanie wskaźników chemicznych do sterylizacji parowej	Typ 4	Typ 5	Typ 6
Do użytku w pojedynczych pakietach wsadu.	✓	✓	✓
Zmienne krytyczne oznaczone na etykiecie produktu zgodnie z wymaganiami normy ISO 11140-1:2014.	✓	✓	✓
Obszerna lista wskazanych cykli w temperaturze od 121°C do 135°C (eliminacja konieczności stosowania wielu rodzajów wskaźników); szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi.	✓	✓	
Charakterystyka umożliwia reagowanie na WSZYSTKIE krytyczne zmienne procesu sterylizacji.		✓	✓
Wynik koreluje z wynikiem wskaźnika biologicznego.		✓	


*ISO 11140-1:2014

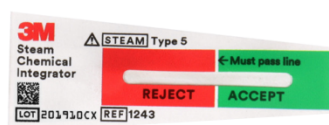

Front

- **Łatwość odczytu wyniku akceptacji / odrzucenia:** Technologia wędrującej substancji wskaźnikowej z zaznaczonymi obszarami PRAWIDŁOWY (kolor zielony) i NIEPRAWIDŁOWY (kolor czerwony) ułatwia i zapewnia interpretację w ciągu kilku sekund.
- **Kod kreskowy:** zapewnia śledzenie i rejestrowanie numeru partii CI oraz dat przydatności przy pomocy systemu śledzenia narzędzi twojego szpitala.

Zamówienia

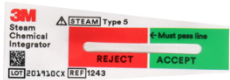Produkt	Nazwa produktu	Nr. katalogowe	szt./opak.	opak./pudełko
	Integratory chemiczne 3M™ Attest™ do pary wodnej 5.08cm	1243A	500	2
		1243B	100	10
	Integratory chemiczne z przedłużeniem 3M™ Attest™ Steam Chemical Integrators 10.16cm	1243RE	1000	2



Dostępne również w urządzeniach PCD ze wskaźnikiem biologicznym i wskaźnikiem chemicznym.



Tył

- **Przykuwający uwagę czerwono-biały nadruk** na części tylnej ułatwia wyszukanie CI w przypadku jego obrócenia w pojemniku sterylizacyjnym.
- **Wytrzymała folia aluminiowa** została zaprojektowana specjalnie do wytrzymywania skrajnych temperatur obecnych podczas sterylizacji parowej.

Aby uzyskać więcej informacji i zamówić próbkę produktu, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym lub odwiedź stronę go.3m.com/sterylizacja

3M Poland Sp. z o.o.
Al. Katowicka 117,
Kajetany
05-830 Nadarzyn
tel. 22 739 60 00
www.3m.pl

1 Gestalt Inc. Badanie naukowe metodą ilościową z klientami zlecone przez 3M, Grudzień 2018. Kierownicy centralnych sterylizatori i osoby kierujące zespołami pielęgniarek operacyjnych w USA i Chinach wykazali preferencję dla następujących integratorów chemicznych: 3M™ Attest™ Steam Chemical Integrator (76%), 3M™ Comply™ Steri-Gage™ Chemical Integrator (10%), Getinge™ Steam Chemical Integrators (8%), Steris™ Steam Chemical Integrators (7%).

3M i Attest to znaki towarowe 3M Company. © 3M 2020. OMG119314.
Data wydania: 07.2022

